

StatClean


Nettoyeur à ultrasons



Code: **SC-P4862**

La quiétude absolue : un nettoyeur à ultrasons silencieux

Doté d'un réservoir de 1,6 gallon et d'un couvercle ayant un support intégré, le **StatClean** peut contenir une variété d'instruments dans son panier à séchage de conception mains libres unique. Cet appareil de nettoyage à ultrasons sera le complément parfait pour vos besoins en matière de retraitement.

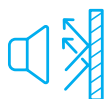

Silencieux

Fabriqués en plastique de qualité industrielle, le boîtier du StatClean, dont les parois sont de 4,5mm d'épaisseur, est plus silencieux que la majorité des boîtiers faits d'acier inoxydable. Le StatClean est donc l'un des appareils à ultrasons les plus silencieux sur le marché.



Facile à utiliser

L'écran LED 3 couleurs du StatClean affiche les réglages complets du minuteur (1 à 30 minutes) et l'option Dégazage*. Le StatClean est doté d'une capacité avancée de mémoire hors tension, permettant de conserver les derniers réglages du minuteur. Son robinet de purge facilement accessible élimine le besoin de vider manuellement la solution du réservoir, évitant ainsi tout dégât.



Puissant

Ses deux transducteurs à ultrasons de qualité industrielle avec circuits de commande indépendants fournissent une distribution uniforme des ondes ultrasoniques, permettant un nettoyage jusqu'à 40 % plus efficace que les autres appareils offerts sur le marché.



Étanche


L'étanchéité du panneau de commande du StatClean empêche toute infiltration, assurant ainsi un rendement optimal et continu de l'appareil.

* Veuillez consulter les Instructions d'utilisation de votre solution nettoyante pour instruments pour déterminer si un dégazage est nécessaire.

Spécifications du StatClean


Dimensions de l'appareil	20,3 po x 12,0 po x 9,4 po (51,5 cm x 30,5 cm x 24,0 cm)
Alimentation électrique	120W (AC 100-120V , 50/60 Hz)
Capacité du réservoir	1,6 gallon (6,0L)
Capacité maximale	1,3 gallon (5,0L)
Capacité minimale	0,9 gallon (3,35L)
Dimensions du réservoir	12,8 po x 8,1 po x 3,9 po (32,3 x 20,5 x 9,9 cm)
Longueur maximale d'un objet pouvant entrer dans le compartiment	13,4 po (34,0 cm)

Accessories

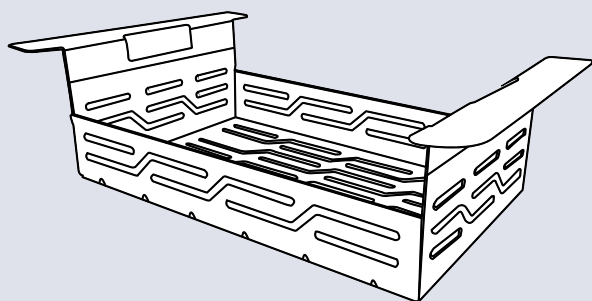


Panier en acier inoxydable

SC-SOB4862A

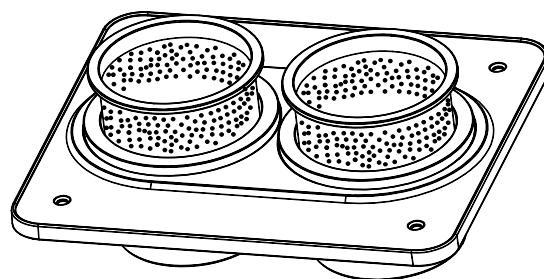


Ensemble de deux bécjers et porte-bécjers :
un bécjer en verre + un bécjer en acier
inoxydable perforé (500 ml chacun)

SC-BHK04A

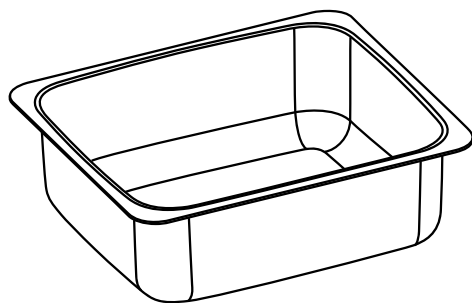

Double support de gobelet

SC-IT4862A

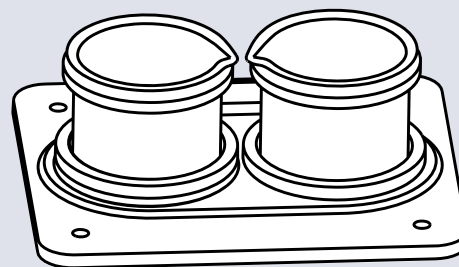

Chambre de nettoyage amovible

SC-BHK02A

Fabriqué pour :
Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Distribué par :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd.,
Toronto, ON, Canada, M3B 3P9
T 416-445-1600
TF 1-800-667-7733
customerservice@scican.com