

STATPURE

Système de filtration d'eau

Filtration de l'eau simplifiée et entretien facile s'adaptant à votre flux de travail.

La configuration unique à quatre filtres de STATPURE produit une eau de qualité exceptionnelle pour les autoclaves, tout en produisant une eau RO hyperfiltrée pour les flacons dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et les rinçages fins dans les laveurs d'instruments automatisés.

Le design épuré des conduites permet une installation facile et intuitive, et les filtres QuickTwist réduisent le temps d'entretien au minimum.



ERGONOMIQUE

Lance de remplissage pour autoclave

Le contrôle de la pression de préhension de la lance réduit les risques de crispations dans la main, ce qui facilite et accélère le remplissage quotidien de l'autoclave dans un cabinet très actif.



PLUS DE TEMPS

STATPURE élimine le stockage et la manipulation de bouteilles d'eau lourdes. Sa conception simple permet de réduire de moitié le temps nécessaire pour changer un filtre, et il peut être configuré pour remplir automatiquement l'équipement de retraitement SciCan.



PLUS D'ÉCONOMIES

STATPURE réduit les coûts à long terme de votre cabinet en éliminant les achats d'eau en bouteille. Son système à quatre filtres produit une eau de grande pureté sans filtre supplémentaire.



PLUS D'EAU

Alimenté par votre réseau d'eau public, STATPURE fournit un volume élevé d'eau à la demande. Les réservoirs de stockage de 4,25 ou 9,5 gallons net permettent de satisfaire les besoins de votre cabinet et d'assurer la continuité du retraitement de vos instruments.



Garantie de 2 ans

STATPURE bénéficie d'une garantie de deux ans qui protège votre investissement et vous donne l'assurance de pouvoir compter sur une filtration d'eau fiable pour le flux de travail de votre Stéricentre.



L'entretien en un instant


La conception du filtre QuickTwist de STATPURE simplifie son remplacement en éliminant le besoin de déconnecter et de reconnecter les conduites et les raccords. Il suffit de dévisser le filtre et de le remplacer.

Remplacement moyen des filtres tous les 5 ans*

Filtre	N° de pièce	12 mois	24 mois	36 mois	48 mois	60 mois
Préfiltre	1 SWP01F	~	~	~	~	~
Hyperfiltration	2 SWP02F				~	
Déionisation	3 SWP03F	~	~	~	~	~
Polissage	4 SWP04F	~	~	~	~	~

*La durée de vie réelle des filtres dépend de la qualité de l'eau disponible sur le site, de sa pression entrante et du volume utilisé. Les intervalles de remplacement des filtres doivent être basés sur les relevés TDS.

Espace nécessaire à l'installation

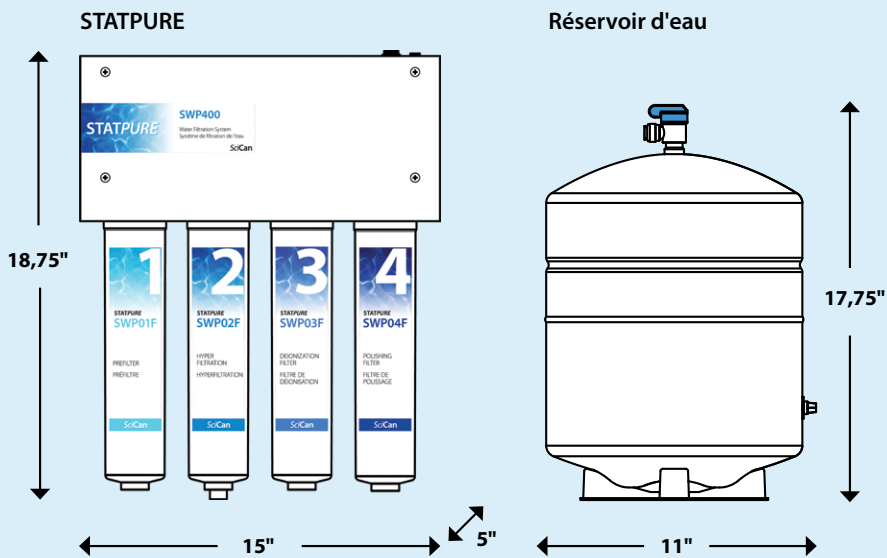

Réservoir d'eau de 4,25 gallons net
STANDARD

Diamètre de 11"
Hauteur de 17,75"

SWP-TA425

Réservoir d'eau de 9,5 gallons net
EN OPTION

Diamètre de 15,75"
Hauteur de 22"

SWP-TA950

Kits de filtres et accessoires

Kit de filtres STATPURE 1
(Préfiltre et polissage)

SWP05KIT

Kit de filtres STATPURE 2
(Paquet de 2 DI)

SWP06KIT

Kit multipaquet STATPURE 3
(1 Préfiltre, 2 DI, 1 Polissage)

SWP07KIT

Kit auxiliaire EV
pour BRAVO G4

M7C200012

Distribué par :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd
Toronto, ON
M3B 3P9, Canada

Distribué par :
Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Pkwy.
Cuyahoga Falls, OH
44223, ÉTATS-UNIS

Fabriqué pour :
Dent4You AG
Bahnhofstrasse 2
CH-9435 Heerbrugg

Pour plus d'informations, consultez www.scican.com

SciCan | Votre Spécialiste en
Contrôle des Infections

STATPURE est une marque de Coltène/Whaledent AG. BRAVO est une marque déposée de SciCan Ltd. Ce système intègre une technologie exclusive et est protégé par des demandes de brevet en instance ainsi que par les droits de propriété intellectuelle associés. Il est fourni sous licence exclusive.