

VistaCool

Système direct au drain de réduction thermique des eaux résiduaires produites par les autoclaves



Élimine l'utilisation de bouteilles à condensat

en refroidissant l'eau usée et en l'acheminant directement et automatiquement au drain.



Préserve la salubrité de votre cabinet

Contribue à prévenir la moisissure, la pourriture et la rouille causées par les déversements ou les fuites et les environnements humides créés par la vapeur qui s'échappe des bouteilles à condensat.



Protège les conduits d'évacuation

Empêche les eaux résiduaires produites par les autoclaves d'endommager la plomberie. Le mécanisme antirefoulement intégré respecte, voir surpasse les codes locaux de plomberie.



Contribue à la sécurité du personnel

Élimine la nécessité de manipuler des bouteilles d'eaux résiduaires brûlantes.




Permet d'économiser du temps

Système non électrique à autorégulation qui ne nécessite aucun entretien, ce qui se traduit en économie de temps.



Installez-le où bon vous semble.


La conception novatrice du nouveau VistaCool V7601 offre les mêmes avantages que ses prédécesseurs, mais occupe moins d'espace. Les brides de fixation incluses avec le système ainsi que son tuyau d'évacuation sous pression permettent une installation verticale ou horizontale pratiquement n'importe où.

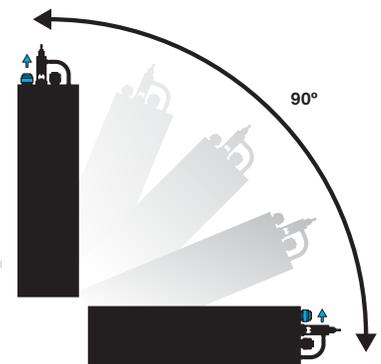


Spécifications du système



V7601 Pour un autoclave

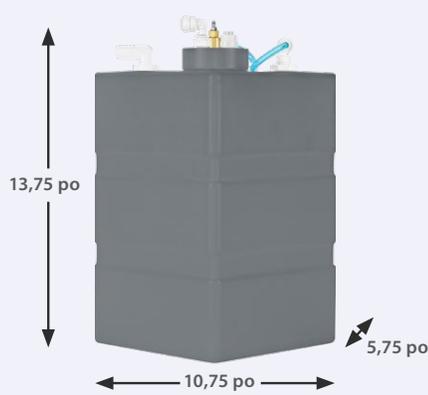

V7501 Pour un autoclave

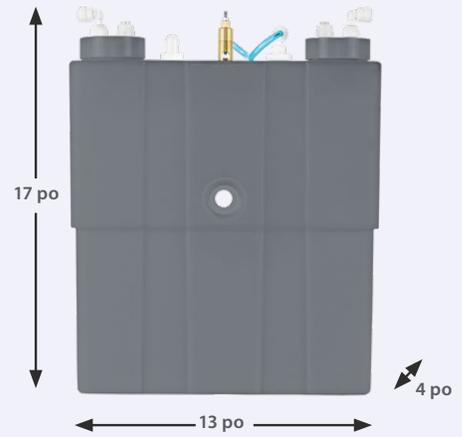

V7502 Pour deux autoclaves

Remarque : Des bases réglables en hauteur par intervalle d'un demi-pouce (0,5 po à 5 po) sont offertes en option pour surélever les modèles V7501 et V7502. Article n° S7545 pour le modèle V7501; article n° S7547 pour le modèle V7502.


Exigences relatives à l'installation

Raccordement ¼ po à l'alimentation en eau froide : Des raccords d'alimentation, une vanne d'alimentation d'eau, un tube d'alimentation d'eau froide et un/des dispositif(s) antirefoulement double contrôle VistaCheck approuvés par Assurance Qualité Internationale (QAI) sont inclus! Accessoire pour intervalle d'air offert séparément si requis par les codes des autorités locales.

Raccordement au conduit d'évacuation muni d'un siphon : Un ou des capteurs thermiques sont inclus pour s'assurer que les eaux résiduelles sont suffisamment refroidies pour être acheminées directement dans le conduit d'évacuation. Raccord en T de 1-1/2 po muni de raccords instantanés inclus avec les modèles V7501 et V7502.

D'une conception compacte, l'adaptateur d'évacuation à orifices multiples DrainHub, en option, est recommandé pour le raccordement de plusieurs appareils au conduit d'évacuation afin d'économiser de l'espace.

Accessoires recommandés

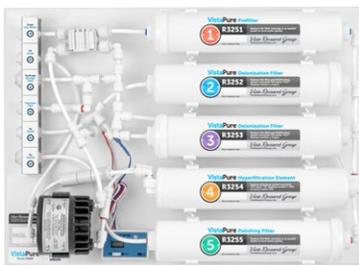

VistaPure

Système de filtration d'eau

Fournit deux degrés d'eau de haute qualité pour les autoclaves, les bouteilles dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et le cycle de rinçage des lave-instruments.

V3000



VistaPure AutoFill

Réapprovisionne automatiquement tout autoclave STATIM, nouveau ou ancien modèle, avec une eau de qualité distillée - voilà une vraie fonction mains libres.

S3020




DrainHub

Adaptateur d'évacuation à orifices multiples

Ce dispositif approuvés par Assurance Qualité Internationale (QAI), en instance de brevet, permet d'y raccorder jusqu'à huit appareils—une incroyable économie d'espace, de coûts et de temps!

DH154 - Adaptateur à 4 orifices

DH158-82 - Adaptateur de vidange à huit orifices avec kit d'accessoires

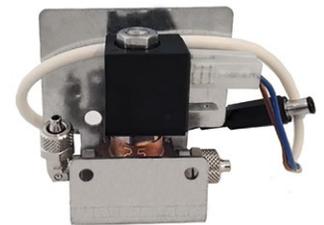

Kit EV auxiliaire BRAVO G4

Il remplit automatiquement le réservoir d'eau interne du BRAVO G4 de SciCan avec de l'eau pour autoclave et vous permet d'avoir les mains libres.

M7C200012

Distribué par :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd
Toronto, ON
M3B 3P9, Canada
TF +1 (800) 667-7733
T +1 (416) 445-1600
customerservice@scican.com

Distribué par :
Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Pkwy.
Cuyahoga Falls, OH
44223, USA

VistaPure et VistaCool sont
fabriqués par :
Crosstex International, Inc.
1625 Pinnacle Peak Rd
Phoenix, AZ 85027, USA
T +1 888-276-7783
HuFriedyGroup.com

Pour avoir plus d'informations, visitez le site www.scican.com

SciCan | Votre Spécialiste en
Contrôle des Infections