


VistaPure

Système de purification d'eau

Voici le nouveau meilleur ami de votre stérilisateur

Le système de purification d'eau VistaPure fournit deux qualités d'eau de haute pureté pour les stérilisateurs à vapeur, les flacons dentaires, les nettoyeurs à ultrasons et le cycle de rinçage final des laveurs d'instruments compatibles. Le système se connecte directement à l'alimentation en eau de la ville et envoie de l'eau de qualité supérieure partout où vous en avez besoin dans le centre de stérilisation pour une utilisation facile et à la demande.

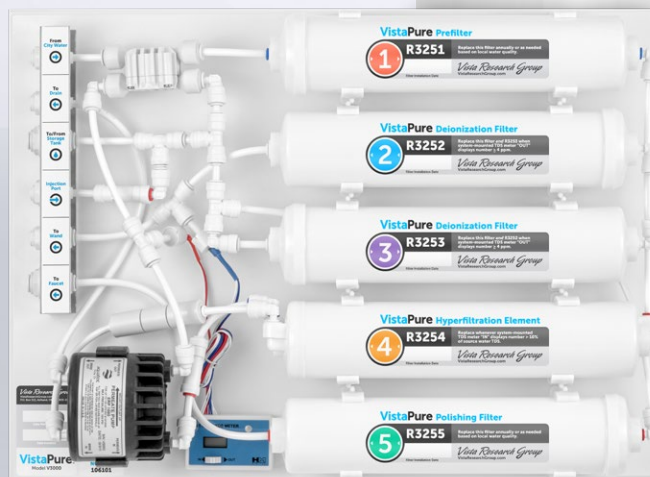

V3000

Deux qualités d'eau nécessaires pour les cabinets dentaires

Pour les stérilisateurs à vapeur :

La baguette « visez et activez » facilite le remplissage des stérilisateurs avec de l'eau prête pour l'autoclave. Plus besoin de soulever de lourds bidons d'eau !

Pour les systèmes à bouteilles :

Le robinet monté fournit de l'eau non corrosive de qualité bouteille (hyperfiltrée) pour les systèmes à bouteilles.



Surveillance instantanée de l'état

Le système de purification d'eau VistaPure est équipé d'un compteur TDS en ligne qui surveille la qualité de l'eau et permet de savoir facilement quand il est temps de remplacer les filtres.



Sans électricité


Le système de purification d'eau VistaPure fonctionne grâce à la pression de l'eau et de l'air, de sorte qu'aucune électricité n'est nécessaire pour fournir toute l'eau de qualité supérieure dont votre bureau a besoin !



Respect de l'environnement

Le système de purification d'eau VistaPure ne nécessite pas de produits chimiques et sa conception efficace minimise la quantité d'eau utilisée produite pendant la filtration.

Accessoires en option

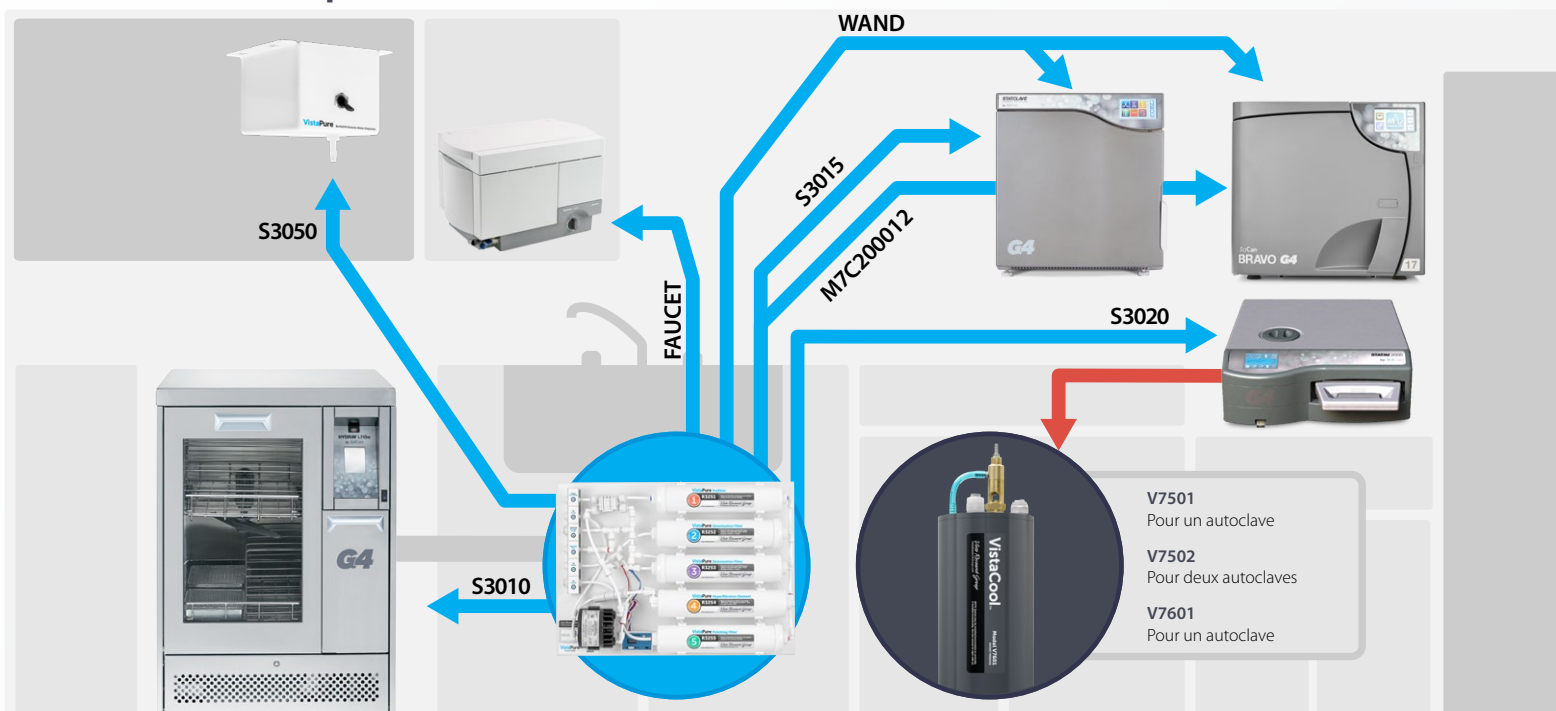

Kit d'adaptation du lave-instruments
S3010

Kit d'adaptation STATCLAVE
S3015


Distributeur d'eau à distance BottleFill
S3050

Kit EV auxiliaire BRAVO G4
M7C200012

AutoFill pour Autoclave STATIM
S3020



Espace requis

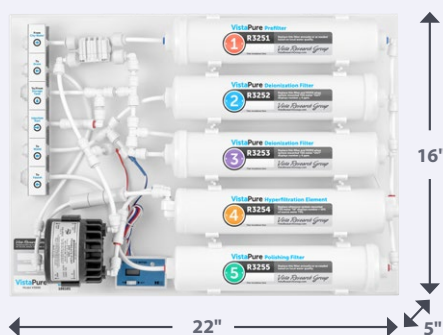

Réservoir de stockage de 4,25 gallons **STANDARD**
S9111 12" de diamètre x 18,25" de hauteur

Réservoir de stockage de 2 gallons **EN OPTION**
S9110 8" de diamètre x 13" de hauteur

Réservoir de stockage de 9,5 gallons **EN OPTION**
S9113 15,5" de diamètre x 25" de hauteur

Fabriqué pour :
Crosstex International, Inc.
1625 Pinnacle Peak Rd
Phoenix, AZ 85027 USA
Tél. +1 (888) 276-7783
HuFriedyGroup.com

Distribué par :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd
Toronto, ON M3B 3P9, Canada
Fax +1 (800) 667-7733
Tél. +1 (416) 445-1600
customerservice@scican.com

Distribué par :
Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Pkwy.
Cuyahoga Falls, OH
44223, USA

Pour avoir plus d'informations, visitez le site **www.scican.com**

SciCan | Votre Spécialiste en
Contrôle des Infections

Tous les noms de produits Vista sont des marques déposées de HuFriedy Mfg. Co. LLC, ses sociétés affiliées ou apparentées, sauf indication contraire. Les marques ne sont pas enregistrées dans toutes les juridictions. HYDRIM et STATIM sont des marques déposées et STATCLAVE et BRAVO sont des marques de SciCan Ltd.