


VistaPure

Sistema de purificación de agua

Conozca al nuevo mejor amigo de su centro de esterilización

El sistema de purificación de agua VistaPure proporciona dos grados de agua de alta calidad para esterilizadores de vapor, procedimientos dentales en general, limpiadores ultrasónicos y el ciclo de enjuague final de las lavadoras de instrumentos compatibles. El sistema se conecta directamente al suministro de agua de red y envía agua de alta calidad a cualquier punto del centro de esterilización que la necesite para un uso sencillo y a demanda.

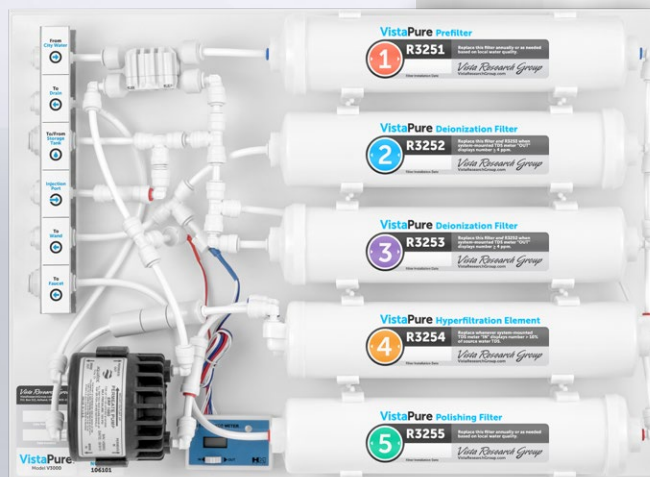

V3000

Dos grados de agua que las clínicas necesitan

Para esterilizadores de vapor:

La herramienta de inyección facilita el llenado de los esterilizadores con agua lista para el autoclave. Ya no hace falta levantar pesados botellones de agua.

Para sistemas de botellas:

El grifo montado proporciona agua de calidad no corrosiva (hiperfiltrada) para llenar botellas de múltiples usos.



Monitoreo Instantáneo

El sistema de purificación de agua VistaPure cuenta con un medidor de TDS en línea que controla la calidad del agua y facilita saber cuándo es el momento de reemplazar los filtros.



No necesita electricidad


El sistema de purificación de agua VistaPure funciona con agua y aire a presión, ¡por lo que no necesita electricidad para suministrar toda el agua de alta calidad que necesita su oficina!



Amigable con el medio ambiente

El sistema de purificación de agua VistaPure no requiere productos químicos, y su eficiente diseño minimiza la cantidad de agua residual producida durante la filtración.

Accesorios opcionales

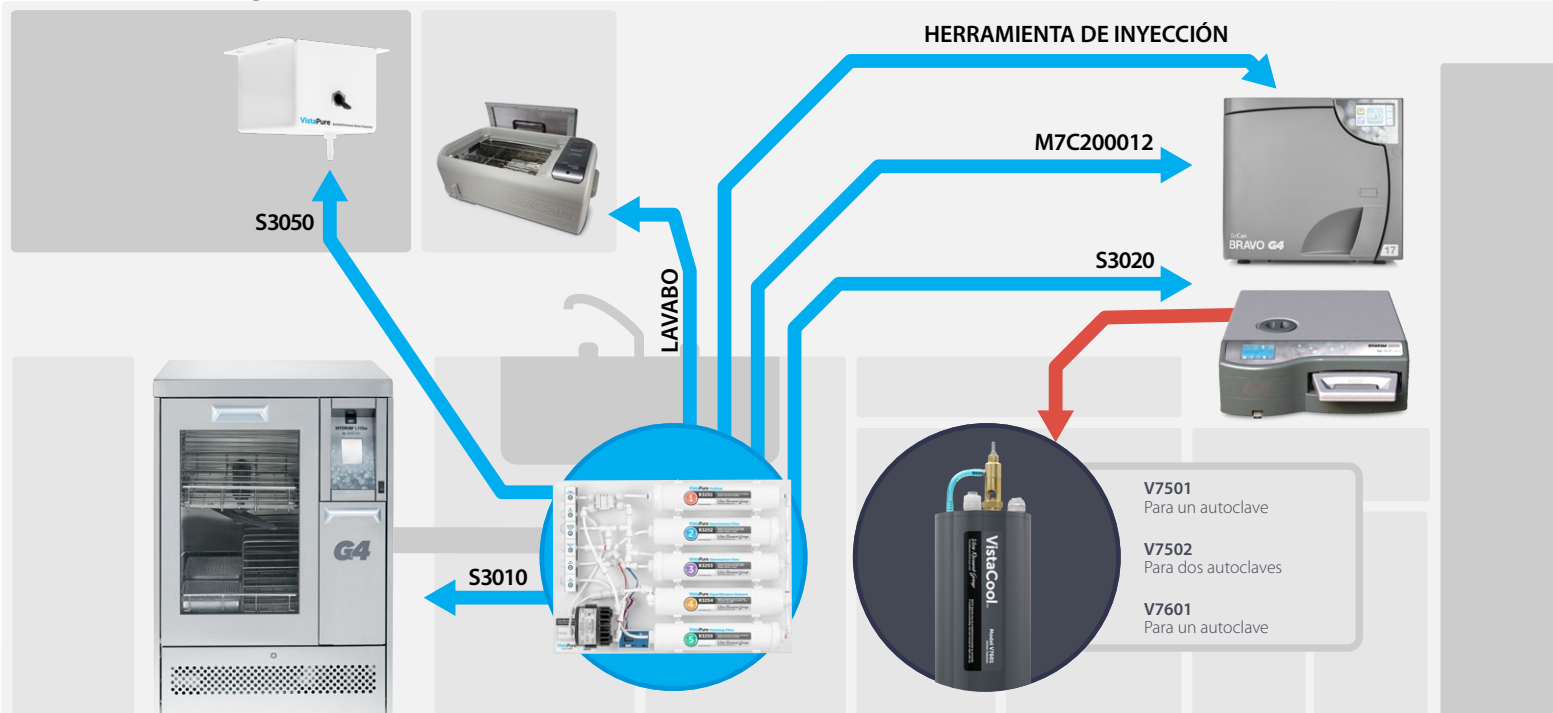

Kit adaptador de lavadora para instrumentos

S3010

Kit EV auxiliar BRAVO G4

M7C200012

Dispensador de agua remoto para botellas


S3050

AutoFill para autoclave STATIM

S3020



Requerimientos de espacio

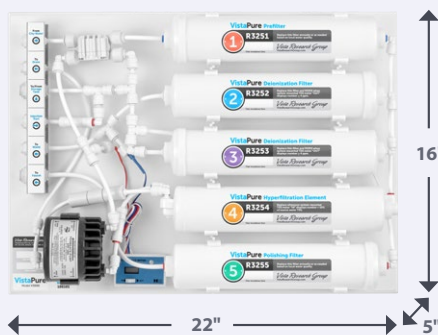

Tanque de almacenamiento con capacidad neta de 4,25 galones

ESTÁNDAR

S9111 12" de diámetro x 18,25" de altura

Tanque de almacenamiento metálico con capacidad neta de 2 galones

OPCIONAL

S9110 8" de diámetro x 13" de altura

Tanque de almacenamiento con capacidad neta de 9,5 galones

OPCIONAL

S9113 15,5" de diámetro x 25" de altura

Fabricado para:
Crosstex International, Inc.
1625 Pinnacle Peak Rd
Phoenix, AZ 85027 USA
888-276-7783
HuFriedyGroup.com

Distribuido por:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Rd
Toronto, ON M3B 3P9, Canadá
TF +1 (800) 667-7733
T +1 (416) 445-1600
customerservice@scican.com

Distribuido por:
Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Pkwy.
Cuyahoga Falls, OH
44223, EE.UU.

Para más información, visite **www.scican.com**

SciCan | Your Infection Control Specialist

Todos los nombres de productos Vista son marcas comerciales de HuFriedy Mfg. Co. LLC, sus filiales o empresas vinculadas, salvo que se indique lo contrario. HYDRIM y STATIM son marcas registradas, y STATCLAVE y BRAVO son marcas comerciales de SciCan Ltd.